




Z-SHAPE
RELAX

Gracey M5 Set mit Z-SHAPE-Griff und neuer,
ultraharter nanopal®-Beschichtung

Gracey M5 Prophylaxe Set
im **Z-SHAPE**- oder **BIONIK**-Griff
mit **ZEPF nanopal**-Beschichtung

Für das Deep-Scaling optimal zusammengestelltes kleines Instrumentenset.
Bestehend aus den M5 Gracey Figuren 1/2, 7/8, 11/12, 13/14 und einem Sichelscaler 204S für den Einsatz in allen Quadranten.

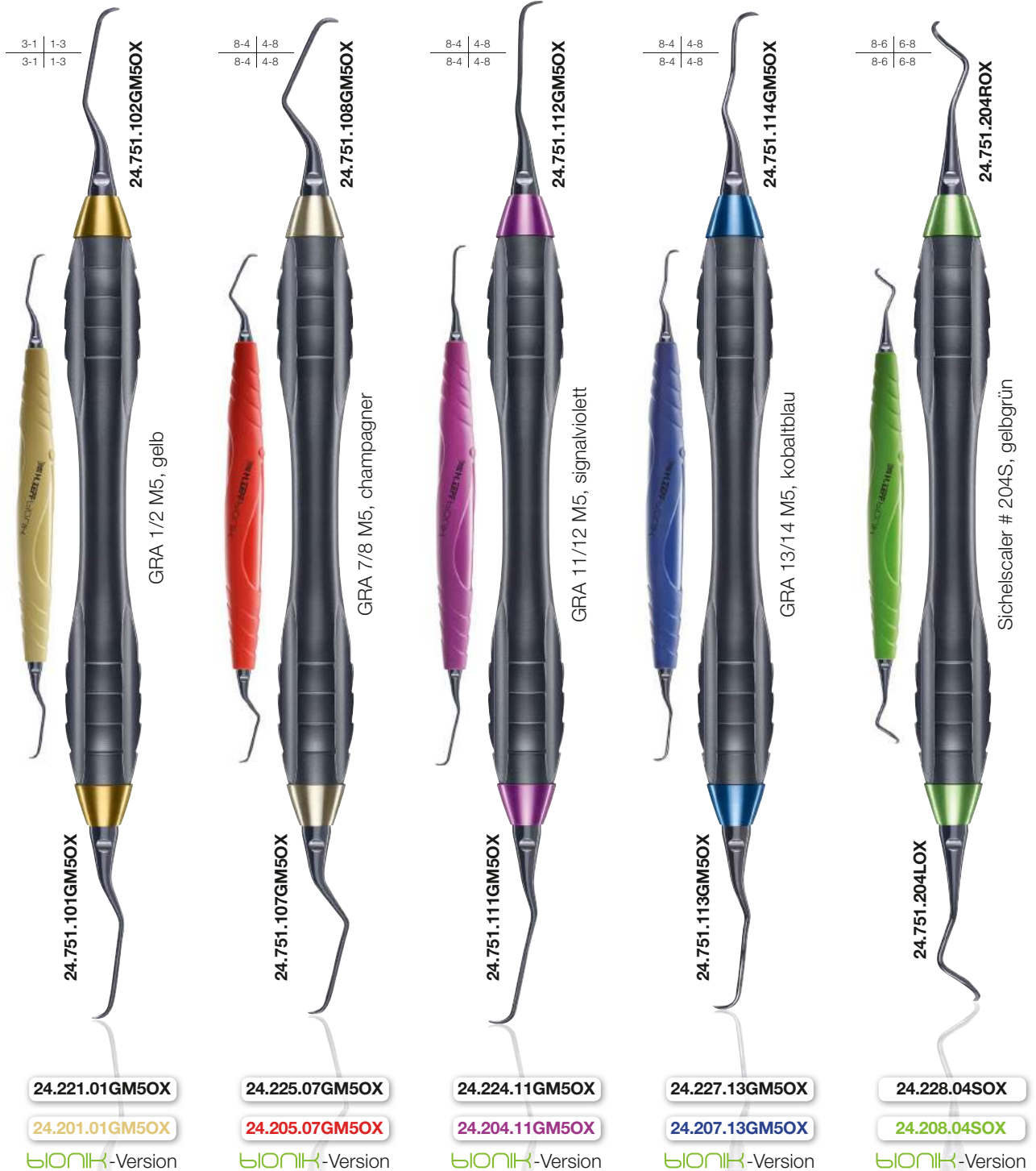

Alternativ-Instrumente:

im **Z-SHAPE**- oder **BIONIK**-Griff
mit **ZEPF nanopal**[®]-Beschichtung

Für das Gracey M5 Prophylaxe Set.

Sichelscaler, Figur 204 SD und

Sichelkurette (Molaren-Scaler), Figur M 23A

5-1 | 1-5
5-1 | 1-5

24.751.204RDOX

Sichelscaler # 204SD, zur Zahnsteinentfernung schmaler Interdenträume im Bereich der Prämolaren und Frontzähne, gelbgrün

8-1 | 1-8
8-1 | 1-8

24.751.123ALOX

Sichelkurette (Molaren-Scaler), # M 23A, zur Zahnsteinentfernung der Interdenträume im Bereich der Molaren, auch universell einsetzbar, gelbgrün

24.751.204LDOX

24.751.123AROX

24.228.04SDOX


24.228.23AOX

24.208.04SDOX

24.208.23AOX

BIONIK-Version

BIONIK-Version

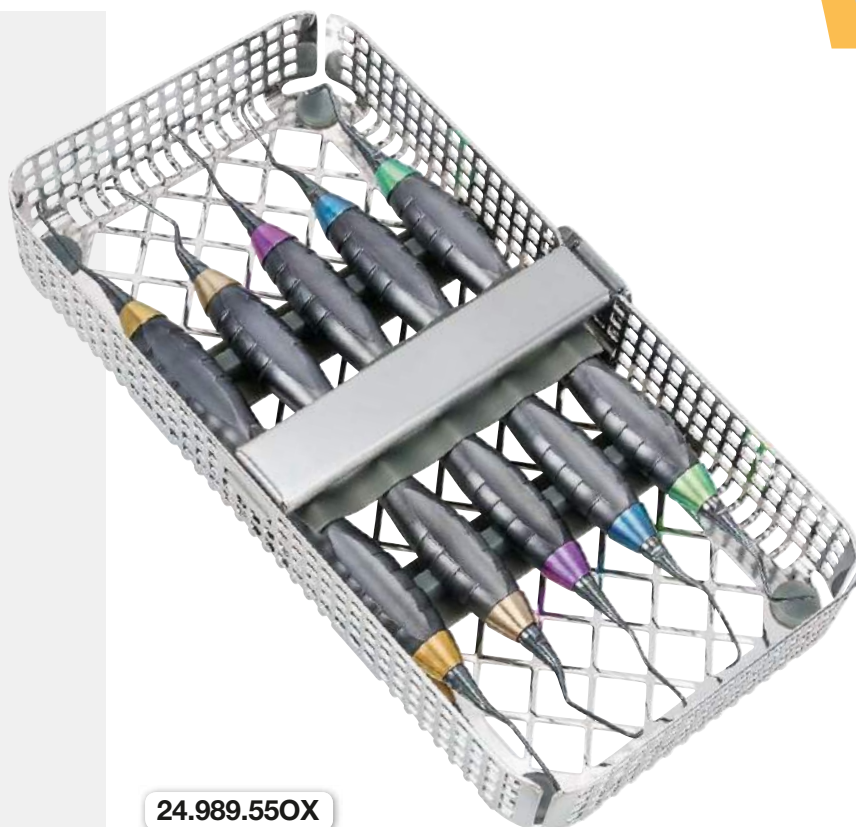

24.989.550X

ZEPF Prophylaxe Set 'M5 Deep Scaling'
im **Z-SHAPE RELAX** Griff, komplett
mit **nanopal**[®]-Beschichtung

24.990.550X

ZEPF Prophylaxe Set 'M5 Deep Scaling'
im **ZEPF BIONIK** Griff, Einsätze
mit **nanopal**[®]-Beschichtung



HELMUT ZEPF M5 Küretten haben einen um etwa 3 mm längeren 1er-Schaft. Die geschärfte Instrumentenspitze ist verkürzt, um eine Kürettage, besonders subgingival für enge und tiefe Taschen, sowie bei schmalen Wurzeloberflächen zu erlauben.

Die neue Griff-Generation

Z-SHAPE RELAX



Ergonomisch optimal gestaltet



Mit den neuen **ZEPF M5 Gracey** Küretten werden Instrumente in neuer Konzeption vorgestellt.

Die **Z-SHAPE Relax** Griffe **24.989.550X** wurden nach ergonomischen Erkenntnissen optimal für den Arbeitsgang bei der Kürettage gestaltet.

Sowohl der Griff als auch die dünnen filigranen Flächen sind mit der neuen **ZEPF nanopal**-Beschichtung versehen.


Die neuen **ZEPF Gracey** Küretten verfügen über einen 0,9 mm dünnen, flexiblen und damit taktilen 1er Schaft. Dadurch adaptieren sie optimal an der tiefliegenden Wurzel.

Die schwarz beschichteten **ZEPF nanopal**-Küretten verfügen über eine beständige, sehr harte und schlagfeste Oberfläche mit hervorragenden Gleiteigenschaften. Mit der einzigartigen Beschichtung wird die Oberflächenhärte auf nicht gekannte **4500 Vickers** erhöht. Die Schneide ist somit hoch vergütet und braucht nicht geschärft zu werden.

Die schwarze, kratzfeste Oberfläche ist einfach zu reinigen und verhindert unangenehme Lichtreflexionen. Im Übrigen wird ein Auftrocknen von Verunreinigungen durch die glatte Oberfläche vermieden.

Wie üblich sind die Instrumentenspitzen mit dem Gewinde M4 x 0,5 mm austauschbar. **QUICKFIX**

nanopal®

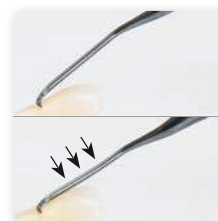

Anpassung an die Oberfläche durch flexiblen Schaft



Idealer Grip und hohe Schneidleistung

AESTHETIC IS THE RESULT

