

RoBa-Edition **Kinderzahnzangen**

Extraktionszangen modif. nach Za. Beck, patentiert




## ROBA-Edition **Kinderzahnzangen**

Extraktionszangen modif. nach Za. Beck, patentiert


Für den kleinen Patienten die kleinstmögliche Extraktionszange, um den Kindern eventuelle Ängste vor großen und aggressiv wirkenden Instrumenten zu nehmen. Ein entspanntes Arbeiten ist somit gewährleistet.

Die patentierten Milchzahnzangen RoBa-Edition nach Za. Beck sind die konsequente Weiterentwicklung herkömmlicher Zahnzangen mit den Vorteilen verjüngter, tiefgreifender Zahnzangen. Die exakt dem Zahn angepassten und nach Za. Beck modifizierten Maulformen gewährleisten ein Höchstmaß an Griff- und Haltefestigkeit während der Anwendung.


Eine verschleißfreie Teflon®-Scheibe verhindert Abnutzungen im Extraktionsgelenk und garantiert stets Leichtgängigkeit.

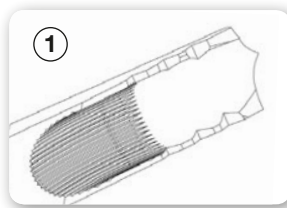


Der Wellenschliff krallt sich radial in die Zahnkronenoberfläche und verhindert eine reitende Bewegung zwischen Zahnkrone und Zangenmaul.

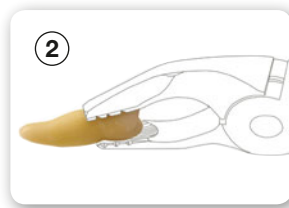

Konkav ausgearbeitetes Zahnzangenmaul passt sich optimal der konvexen Zahnform an. Tiefgreifend oder auf der Krone – Parallelität der Zahnzange ist immer gewährleistet, was eine Fraktur des Zahnes oder der Wurzel nahezu ausschließt.

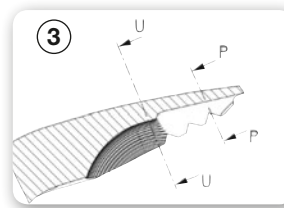


Verschieden tief ausgearbeitete Innenkonturen im Zangenmaul gewährleisten maximale Adaption am Zahn in unterschiedlichsten Gegebenheiten. Kein Kippen des Zahns bei rotierender und/oder hebelnder Luxation.

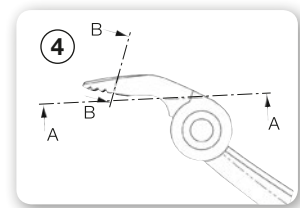

Die verjüngte Außenkontur erlaubt tiefes Greifen auch subgingival.



Abbildung		Artikelbeschreibung	Bestellmenge
	4.3.   3.4.	<b>10.685.07</b> # 7 obere Prämolaren und Eckzähne	1 Stück
	4.3.   3.4.	<b>10.685.13</b> # 13 untere Prämolaren und Eckzähne	1 Stück
	5.   5.	<b>10.685.22</b> # 22 untere Molaren	1 Stück
	2.1.   1.2.	<b>10.685.29</b> # 29 obere Schneidezähne	1 Stück
	2.1.   1.2.	<b>10.685.33</b> # 33 untere Schneidezähne	1 Stück
	5.4.3.   3.4.5.	<b>10.685.51</b> # 51 obere Molaren, Prämolaren und Eckzähne	1 Stück
	5.   5.	<b>10.685.52</b> # 52 obere Molaren	1 Stück

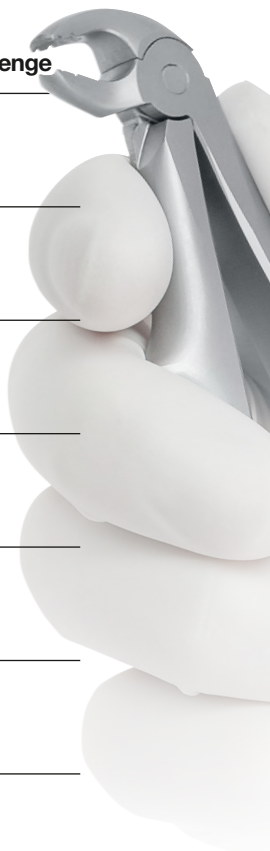

AESTHETIC IS THE RESULT